

---

## Instructions for use

# Serotonin ELISA

**REF**

**DEE8900**



**IVD**



## 1. Introduction

### 1.1 Intended use and principle of the test

Enzyme Immunoassay for the quantitative determination of Serotonin in serum, urine and platelets.

In the first step, Serotonin is quantitatively acylated.

The subsequent competitive ELISA kit uses the microtiter plate format. The antigen is bound to the solid phase of the microtiter plate. The acylated standards, controls and samples and the solid phase bound analyte compete for a fixed number of antiserum binding sites. After the system is in equilibrium, free antigen and free antigen-antiserum complexes are removed by washing. The antibody bound to the solid phase is detected by an anti-rabbit IgG-peroxidase conjugate using TMB as a substrate. The reaction is monitored at 450 nm.

Quantification of unknown samples is achieved by comparing their absorbance with a reference curve prepared with known standard concentrations.

### 1.2 Clinical application

Serotonin (5-hydroxytryptamine) is an intermediate product of tryptophan metabolism and is located primarily in the enterochromaffin cells of intestine (EC-cells), serotonergic neurons of the brain, platelets of the blood and is well established as a neurotransmitter in the central nervous system. EC-cell production accounts for 80% of the body's serotonin content. Serotonin is predominately metabolized to 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA), which is excreted by the kidneys.

Nearly all of the serotonin in circulating blood is concentrated in platelets. Altered concentrations of circulating serotonin have been implicated in several pathological conditions including chronic tension, headache, schizophrenia, hypertension, Huntington's disease, Duchenne's muscular dystrophy and early acute appendicitis.

The determination of serum serotonin levels is of high clinical significance for diagnostic assessment of carcinoid syndrome. An increasing interest in the determination of serotonin in platelets including uptake and release kinetics is expected in the near future.

Therapeutic consequences should never be based on laboratory results alone even if all test results are in agreement with the items as under point "Procedural cautions, guidelines and warnings". Any laboratory result is only a part of the total clinical picture of the patient.

Only in cases where the laboratory results are in an acceptable agreement with the overall clinical picture of the patient it can be used for therapeutic consequences.

The test result itself should never be the sole determinant for deriving any therapeutic consequences.

## 2. Procedural cautions, guidelines, warnings and limitations

### 2.1 Procedural cautions, guidelines and warnings

- (1) This kit is intended for professional use only. Users should have a thorough understanding of this protocol for the successful use of this kit. Only the test instruction provided with the kit is valid and has to be used to run the assay. Reliable performance will only be attained by strict and careful adherence to the instructions provided.
- (2) This assay was validated for a certain type of sample as indicated in *Intended Use* (please refer to Chapter 1). Any off-label use of this kit is in the responsibility of the user and the manufacturer cannot be held liable.
- (3) Reagents of this kit which contain human serum or plasma have been tested and confirmed negative for HIV I/II, HBsAg and HCV by approved procedures. All reagents, however, should be treated as potential biohazards in use and for disposal.
- (4) The principles of Good Laboratory Practice (GLP) have to be followed.
- (5) In order to reduce exposure to potentially harmful substances, wear lab coats, disposable protective gloves and protective glasses where necessary.
- (6) All kit reagents and specimens should be brought to room temperature and mixed gently but thoroughly before use. Avoid repeated freezing and thawing of reagents and specimens.
- (7) For dilution or reconstitution purposes, use deionized, distilled, or ultra-pure water.
- (8) The microplate contains snap-off strips. Unused wells must be stored at 2 °C to 8 °C in the sealed foil pouch with desiccant and used in the frame provided.
- (9) Duplicate determination of sample is highly recommended to be able to identify potential pipetting errors.
- (10) Once the test has been started, all steps should be completed without interruption. Make sure that the required reagents, materials and devices are prepared ready at the appropriate time.
- (11) Incubation times do influence the results. All wells should be handled in the same order and time intervals.

- (12) To avoid cross-contamination of reagents, use new disposable pipette tips for dispensing each reagent, sample, standard and control.
- (13) A calibrator curve must be established for each run.
- (14) The controls should be included in each run and fall within established confidence limits. The confidence limits are listed in the QC-Report.
- (15) Do not mix kit components with different lot numbers within a test and do not use reagents beyond expiry date as shown on the kit labels.
- (16) Avoid contact with Stop Solution containing 0.25 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. It may cause skin irritation and burns. In case of contact with eyes or skin, rinse off immediately with water.
- (17) Some reagents contain sodium azide (NaN<sub>3</sub>) as preservatives. In case of contact with eyes or skin, rinse off immediately with water. NaN<sub>3</sub> may react with lead and copper plumbing to form explosive metal azides. When disposing reagents, flush with a large volume of water to avoid azide build-up.
- (18) TMB substrate has an irritant effect on skin and mucosa. In case of possible contact, wash eyes with an abundant volume of water and skin with soap and abundant water. Wash contaminated objects before reusing them.
- (19) For information on hazardous substances included in the kit please refer to Material Safety Data Sheets (MSDS). The Material Safety Data Sheet for this product is made available directly on the website of the manufacturer or upon request.
- (20) The expected reference values reported in this test instruction are only indicative. It is recommended that each laboratory establishes its own reference intervals.
- (21) The results obtained with this test kit should not be taken as the sole reason for any therapeutic consequence but have to be correlated to other diagnostic tests and clinical observations.
- (22) Kit reagents must be regarded as hazardous waste and disposed of according to national regulations.

## 2.2 Limitations

Any inappropriate handling of samples or modification of this test might influence the results.

### 2.2.1 Interfering substances

#### Serum/Plasma

Samples containing precipitates or fibrin strands or which are haemolytic or lipemic might cause inaccurate results.

#### 24-hour urine

Please note the sample preparation! If the percentage of the final concentration of acid is too high, the buffer capacity of the Acylation Buffer is insufficient. As a consequence Serotonin will not be quantitatively acylated.

### 2.2.2 Drug interferences

Please refer to point "Sample collection and storage".

### 2.2.3 High-Dose-Hook effect

No hook effect was observed in this test.

## 3. Storage and stability

Store the unopened reagents at 2 - 8 °C until expiration date. Do not use components beyond the expiry date indicated on the kit labels. Once opened the reagents are stable for 1 month when stored at 2 - 8 °C. Once the resealable pouch has been opened, care should be taken to close it tightly with desiccant again.

## 4. Materials

### 4.1 Contents of the kit

**BA D-0023**    REAC-TUBES    **Reaction Tubes \***)- Ready to use

Contents:        Reaction Tubes in a resealable pouch

Volume:         2 x 50 tubes

\*) Instead of the Reaction Tubes, it is also possible to use 48 wells microtiter plates for the sample preparation and acylation (please refer to 6.2). These plates (BA D-0033) are available upon request.

**BA E-0030**    WASH-CONC 50x    **Wash Buffer Concentrate** - Concentrated 50x

Contents:        Buffer with a non-ionic detergent and physiological pH

Volume:         1 x 20 ml/vial, light purple cap

- BA E-0045**      **CONJUGATE**      **Enzyme Conjugate** - Ready to use  
 Contents:      Goat anti-rabbit immunoglobulins conjugated with peroxidase  
 Volume:      1 x 12 ml/vial, red cap
- BA E-0055**      **SUBSTRATE**      **Substrate** - Ready to use  
 Contents:      Chromogenic substrate containing tetramethylbenzidine, substrate buffer and hydrogen peroxide  
 Volume:      1 x 12 ml/vial, black cap
- BA E-0080**      **STOP-SOLN**      **Stop Solution** - Ready to use  
 Contents:      0.25 M sulfuric acid  
 Volume:      1 x 12 ml/vial, light grey cap
- BA E-0931**      **SER-5-HIAA**      **Serotonin Microtiter Strips** - Ready to use  
 Contents:      1 x 96 well (12x8) antigen precoated microwell plate in a resealable pouch with desiccant
- BA E-8910**      **SER-AS**      **Serotonin Antiserum** - Ready to use  
 Contents:      Rabbit anti-serotonin antibody, blue coloured  
 Volume:      1 x 12 ml/vial, blue cap

**Standards and Controls** - Ready to use

Cat. no.	Component	Colour/Cap	Concentration ng/ml	Concentration nmol/l	Volume/Vial
<b>BA R-8901</b>	<b>STANDARD A</b>	white	0	0	4 ml
<b>BA R-8902</b>	<b>STANDARD B</b>	light yellow	15	85.1	4 ml
<b>BA R-8903</b>	<b>STANDARD C</b>	orange	50	284	4 ml
<b>BA R-8904</b>	<b>STANDARD D</b>	dark blue	150	851	4 ml
<b>BA R-8905</b>	<b>STANDARD E</b>	light grey	500	2 840	4 ml
<b>BA R-8906</b>	<b>STANDARD F</b>	black	2 500	14 175	4 ml
<b>BA R-8951</b>	<b>CONTROL 1</b>	light green	Refer to vial labels for expected value and acceptable range!		4 ml
<b>BA R-8952</b>	<b>CONTROL 2</b>	dark red			4 ml

Conversion: Serotonin (ng/ml) x 5.67 = Serotonin (nmol/l)


Contents: TRIS buffer with non-mercury preservatives, spiked with defined quantity of serotonin

- BA E-8912**      **ACYL-REAG**      **Acylation Reagent** - Ready to use  
 Contents:      Acylation reagent in dimethylsulfoxide  
 Volume:      1 x 3 ml/vial, green cap

- BA E-8911**      **ACYL-BUFF**      **Acylation Buffer** - Ready to use  
 Contents:      TRIS buffer with non-mercury preservative  
 Volume:      1 x 55 ml/vial, light grey cap

**4.2 Additional materials and equipment required but not provided in the kit**

- Calibrated precision pipettes to dispense volumes between 25 – 500 µl
- Microtiter plate washing device (manual, semi-automated or automated)
- ELISA reader capable of reading absorbance at 450 nm and if possible 620 - 650 nm
- Absorbent material (paper towel)
- Water (deionized, distilled, or ultra-pure)
- Vortex mixer

 The assay can be performed with or without shaking. If a microtiter plate shaker is used, it should have the following characteristics: shaking amplitude 3 mm; approx. 600 rpm.

## 5. Sample collection and storage

Foods or liquids containing serotonin such as pineapple, eggplant, avocados, bananas, currants, kiwis, melon, mirabelles, plums, peaches chocolate, gooseberries, tomatoes, or walnuts, should be avoided 2 days before and including the day of the sample collection (24-hour urine). Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) influence serotonin levels. People who are taking such medications should consult with their doctor before specimen collection.

**Repeated freezing and thawing of the samples should be avoided.**

### **Serum**

Collect blood by venipuncture (monovette or vacuette for serum), allow to clot, and separate serum by centrifugation at room temperature. Do not centrifuge before complete clotting has occurred. Patients receiving anticoagulant therapy may require increased clotting time.

Haemolytic and especially lipemic samples should not be used for the assay.

Storage: up to 6 hours at 2 - 8 °C, for longer period (up to 6 month) at -20 °C.

### **Urine**

Spontaneous or 24-hour urine, collected in a bottle containing 10 – 15 ml of 6 M HCl, should be used.

Determine the total volume of urine excreted during a period of 24 h for calculation of the results.

Storage: up to 24 hours at 2-8°C, for longer periods (up to 6 months) at -20 °C.

Avoid exposure to direct sunlight.

### **Plasma**

More than 98 percent of the circulating serotonin is located in the platelets and is released during blood clotting. Blood must be collected by venipuncture in plastic tubes (monovette or vacuette) containing EDTA or Citrate as anticoagulant.

### **Platelet-rich plasma (PRP)**

To obtain platelet-rich plasma (PRP) the samples are centrifuged for 10 minutes at room temperature (200 x g). Transfer the supernatant to another tube and count the platelets.

### **Platelets**

The platelet pellet is obtained by adding 800 µl of physiological saline to 200 µl of PRP (containing between 350,000 – 500,000 platelets/µl) and centrifugation (4,500 x g, 10 minutes at 4 °C). The supernatant is then discarded.

200 µl of water (deionized, distilled, or ultra-pure) is added to the pellet and mixed thoroughly on a vortex mixer. This suspension can be stored frozen for several weeks at < -20 °C.

After thawing of the frozen samples, centrifuge at 10,000 x g for 2 minutes at room temperature.


**25 µl** of the supernatant is used for the acylation reaction.

 For the determination of Serotonin in **platelet-poor plasma** and **cerebrospinal fluid** the Serotonin Research™ ELISA (for details contact your local supplier) should be used.

## 6. Test procedure for serum, urine and platelets

Allow all reagents and samples to reach room temperature. The measurement in duplicates is recommended.

The binding of the antisera and the enzyme conjugates and the activity of the enzyme used are temperature dependent, and the extinction values may vary if a thermostat is not used. The higher the temperature, the higher the extinction values will be. Corresponding variations also apply to the incubation times. The optimal temperature during the Enzyme Immunoassay is between 20 – 25 °C.

 *In case of overflow, read the absorbance of the solution in the wells within 10 minutes, using a microplate reader set to 405 nm*

## 6.1 Preparation of reagents

### Wash Buffer


Dilute the 20 ml Wash Buffer Concentrate with water (deionized, distilled, or ultra-pure) to a final volume of 1000 ml.

Storage: 1 month at 2 – 8 °C

### Acylation Reagent


The Acylation Reagent (BA E-8912) has a freezing point of 18.5 °C. To ensure that the Acylation Reagent is liquid when being used, it must be ensured that the Acylation Reagent has reached room temperature and forms a homogeneous, crystal-free solution before being used.

## 6.2 Sample preparation and acylation of serum, urine and platelets

1.	Pipette <b>25 µl</b> of <b>standards, controls</b> and <b>serum, urine</b> or <b>platelets</b> into the respective <b>Reaction Tubes</b> .
2.	Add <b>500 µl</b> of <b>Acylation Buffer</b> to all tubes.
3.	Add <b>25 µl</b> of <b>Acylation Reagent</b> to all tubes.
4.	<b>Mix thoroughly</b> and <b>incubate</b> for <b>15 min</b> at <b>RT</b> (20 – 25 °C).
	Take <b>25 µl</b> of the <b>prepared standards, controls and samples</b> for the Serotonin ELISA

## 6.3 Serotonin ELISA

The usage of a shaker is not mandatory. The alternative protocol without shaker is highlighted in italic and shaded in grey.

1.	Pipette <b>25 µl</b> of the <b>acylated standards, controls and samples</b> into the appropriate wells of the <b>Serotonin Microtiter Strips</b> .
2.	Pipette <b>100 µl</b> of the <b>Serotonin Antiserum</b> into all wells.
3.	Incubate <b>30 min</b> at <b>RT</b> (20 – 25 °C) on a <b>shaker</b> (approx. 600 rpm). <i>Without usage of a shaker: shake the <b>Serotonin Microtiter Strips</b> shortly by hand and incubate for <b>1 h</b> at <b>RT</b> (20 – 25 °C).</i>
4.	Discard or aspirate the contents of the wells. Wash the plate <b>3 x</b> by adding <b>300 µl</b> of <b>Wash Buffer</b> , <b>discarding</b> the content and <b>blotting dry each time</b> by tapping the inverted plate on absorbent material.
5.	Pipette <b>100 µl</b> of the <b>Conjugate</b> into all wells.
6.	Incubate for <b>15 min</b> at <b>RT</b> (20 – 25 °C) on a <b>shaker</b> (approx. 600 rpm). <i>Without usage of a shaker: incubate for <b>15 min</b> at <b>RT</b> (20 – 25 °C).</i>
7.	Discard or aspirate the contents of the wells. Wash the plate <b>3 x</b> by adding <b>300 µl</b> of <b>Wash Buffer</b> , <b>discarding</b> the content and <b>blotting dry each time</b> by tapping the inverted plate on absorbent material.
8.	Pipette <b>100 µl</b> of the <b>Substrate</b> into all wells.
9.	Incubate for <b>15 ± 2 min</b> at <b>RT</b> (20 – 25 °C) on a <b>shaker</b> (approx. 600 rpm).  <i>Without usage of a shaker: incubate for <b>15 min ± 2 min</b> at <b>RT</b> (20 – 25 °C).</i> <b>Avoid exposure to direct sunlight!</b>
10.	Add <b>100 µl</b> of the <b>Stop Solution</b> to each well and shake the microtiter plate to ensure a homogeneous distribution of the solution.
11.	<b>Read</b> the absorbance of the solution in the wells within 10 minutes, using a microplate reader set to <b>450 nm</b> (if available a reference wavelength between 620 nm and 650 nm is recommended).

## 7. Calculation of results

Measuring range	<b>Serotonin</b>
	10.2 – 2 500 ng/ml

The calibration curve is obtained by plotting the absorbance readings (calculate the mean absorbance) of the standards (linear, y-axis) against the corresponding standard concentrations (logarithmic, x-axis). Use a non-linear regression for curve fitting (e.g. spline, 4- parameter, akima).

The concentrations for **urine** and **serum samples** can be read directly from the calibration curve.

### Calculation of serotonin in platelets

The content of serotonin in platelets is referred to  $10^9$  platelets.

*Illustrative example:*

Measured Serotonin concentration: 100 ng/ml

Number of the platelets in the PRP: 300 000 /  $\mu\text{l}$  =  $0.3 \times 10^9$  platelets/ml with serotonin content of 100 ng.

The resulting serotonin content in the platelets is:

333 ng/  $10^9$  platelets (100 ng serotonin  $\times$   $1.0 \times 10^9$  /  $0.3 \times 10^9$ )

### Conversion

Serotonin (ng/ml)  $\times$  5.67 = Serotonin (nmol/l)

### Expected reference values

It is strongly recommended that each laboratory should determine its own reference values.

In a study conducted with apparently normal healthy adults, using the Serotonin ELISA <sup>Fast Track</sup> the following values were observed:

	<b>Serotonin</b>
Serum	70 - 270 ng/ml
Urine	50 - 250 $\mu\text{g}/24\text{h}$
Serotonin in platelets	500 - 950 ng/ $10^9$ platelets


## 7.1 Quality control

It is recommended to use control samples according to national regulations. Use controls at both normal and pathological levels. The kit, or other commercially available, controls should fall within established confidence limits. The confidence limits of the kit controls are printed on the QC-Report.

## 7.2 Typical standard curve:



*This example is a mean of 11 different runs; do not use for calculation!*

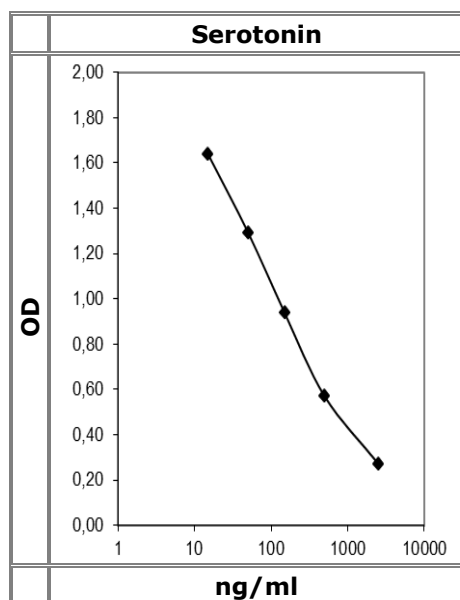

## 8. Assay characteristics

<b>Sensitivity</b>	Limit of Detection (LOD) Limit of Quantitation (LOQ)	6.2 ng/ml 10.2 ng/ml
--------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------

<b>Analytical Specificity (Cross Reactivity)</b>	<b>Substance</b>	<b>Cross Reactivity (%)</b>
	Tryptamine	0.05
	Melatonin	0.08
	5-Hydroxyindole acetic acid	< 0.014
	Phenylalanine	< 0.014
	Histidine	< 0.019
	Tyramine	< 0.018
	5-Hydroxytryptophane	< 0.014

<b>Precision</b>							
<b>Intra-Assay</b>				<b>Inter-Assay</b>			
	Sample	Range (ng/ml) mean ± SD	CV (%)		Sample	Range (ng/ml) mean ± SD	CV (%)
Serotonin Urine (n = 40)	1	140.7 ± 16.3	11.6	Serotonin Urine (n = 15)	1	126.1 ± 14.2	11.3
	2	421.2 ± 38.6	9.2		2	414.5 ± 48.6	11.7
	3	1560 ± 215.3	13.8		3	1343 ± 200.2	14.9
Serotonin Serum (n = 20)	1	101.3 ± 9.6	9.7	Serotonin Serum (n = 7)	1	83.1 ± 10.3	12.4
	2	246.8 ± 31.2	12.6		2	244.3 ± 25.4	10.4
	3	667.5 ± 71.6	10.8				

<b>Linearity</b>			Range ng/ml	Serial dilution up to	Mean Linearity (%)	Range (%)
	Serotonin	Urine	30 - 3500	1:65	100	88 - 118
		Serum	40 - 3000	1:33	96	80 - 113

<b>Recovery</b>			Mean (%)	Range (%)	% Recovery after spiking
	Serotonin	Urine	96	74 - 105	
		Serum	108	89 - 126	

<b>Method comparison versus RIA*</b>	Urine Serum	$y = 0,94x + 19.58; R^2 = 0,98$ $y = 0,85x + 33.18; R^2 = 0,97$
------------------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------











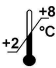

\*Commercial available RIA
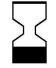
## 9. **References/Literature**

- (1) Oliveira et al. Disturbances of Wnt/ $\beta$ -catenin pathway and energy metabolism in early CKD: effect of phosphate binders. Nephrol Dial Transplant, 28(10):2510-2517 (2013)
- (2) Shahin et al. Detection of Plasma and Urinary Monoamines and Their Metabolites in Nonsegmental Vitiligo. Acta Dermatovenerol Croat, 20(1):14-20 (2012)
- (3) Ciprandi et al. Serotonin in Allergic Rhinitis: a Possible Role for Behavioural Symptoms, 10(3):183-188 (2011)

 **For updated literature or any other information please contact your local supplier.**

### Symbols:

	Storage temperature		Manufacturer		Contains sufficient for <n> tests
	Expiry date		Batch code		For in-vitro diagnostic use only!
	Consult instructions for use		Content		CE labelled
	Caution		Catalogue number		For research use only!



## 1. Einleitung

### 1.1 Verwendungszweck und Testprinzip

Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Serotonin in Serum, Urin und Thrombozyten.

Im Verlauf der Probenvorbereitung wird das Serotonin zu einem N-Acyl-Derivat modifiziert.

Der sich anschließende kompetitive ELISA basiert auf dem Mikrotiterplattenformat. Das Antigen ist an die feste Phase gebunden. Die acylierten Standards, Kontrollen und Proben und die an die Festphase gebundenen Antigene konkurrieren um die vorhandenen Bindungsstellen der Antikörper. Nachdem das System im Gleichgewicht ist, werden die freien Antigene und die freien Antigen-Antikörper-Komplexe durch Waschen entfernt. Der an die Festphase gebundene Antigen-Antikörper-Komplex wird mit einem enzymmarkierten Antikörper komplexiert und mit einem Substrat durch eine Farbreaktion nachgewiesen. Die Reaktion wird bei 450 nm gemessen.

Die Konzentrationen der unbekanntenen Proben werden mit Hilfe einer Standardkurve und Abgleich der gemessenen Absorption ermittelt.

### 1.2 Klinische Anwendung

Serotonin (5-Hydroxytryptamin) ist ein Intermediärprodukt des Tryptophanstoffwechsels und ein gut untersuchter Neurotransmitter und kann in hohen Konzentrationen in den enterochromaffinen Zellen des Darms (EC-Zellen), den serotonergen Neuronen des Gehirns und den Thrombozyten nachgewiesen werden. Ungefähr 80% des gesamten Serotonins wird dabei in den EC-Zellen gebildet. Serotonin wird hauptsächlich zu 5-Hydroxyindol-Essigsäure (5-HIAA) abgebaut, das danach über die Nieren ausgeschieden wird.

Im Blutkreislauf befindet sich der weitaus größte Teil des Serotonins in den Blutplättchen. Veränderte Serotoninspiegel des peripheren Blutes wurden sowohl bei physischen als auch psychischen Erkrankungen berichtet. Erhöhte Konzentrationen waren bei Migräne, Schizophrenie, der essentiellen Hypertonie, Huntington's Chorea, Duchenne's Muskeldystrophie und akuter Blinddarmentzündung nachweisbar.

Große klinische Bedeutung hat die Serotoninbestimmung im Serum für die diagnostische Abklärung des Karzinoidsyndroms. Eine zunehmende Bedeutung ist für die Bestimmung von Serotonin in Thrombozyten - einschließlich entsprechender Aufnahme- und Freisetzungskinetiken - zu erwarten.

Therapeutische Konsequenzen dürfen niemals allein auf Grund von Laborwerten herangezogen werden, auch wenn diese Werte in Übereinstimmung mit den Qualitätskriterien der Methode beurteilt werden. Jedes Laborergebnis trägt immer nur zu einem Teil des klinischen Bildes bei.

Nur wenn die Laborergebnisse in akzeptabler Übereinstimmung mit dem klinischen Gesamtbild stehen, dürfen daraus therapeutische Konsequenzen abgeleitet werden.

Die Laborwerte selbst dürfen niemals der alleinige Grund für daraus abgeleitete therapeutische Konsequenzen sein.

## 2. Verfahrenshinweise, Richtlinien, Warnungen und Anwendungsgrenzen

### 2.1 Verfahrenshinweise, Richtlinien und Warnungen

- (1) Dieses Kit ist nur für den gewerblichen Gebrauch. Für eine erfolgreiche Anwendung dieses Kits benötigen die Anwender ein umfassendes Verständnis dieses Protokolls. Einzig die im Kit enthaltene Testanleitung ist gültig und bei der Durchführung des Assays zu verwenden. Für eine zuverlässige Leistung müssen die mitgelieferten Anweisungen genau und sorgfältig befolgt werden.
- (2) Dieser Assay wurde für die unter *Verwendungszweck* (siehe Kapitel 1) angegebene Probenart validiert. Jede nicht zugelassene Anwendung dieses Kits obliegt der Verantwortung des Anwenders und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.
- (3) Die humanes Serum oder Plasma enthaltenden Reagenzien des Kits wurden mit geprüften Verfahren auf HIV I/II, HBsAg und HCV getestet und als negativ bestätigt. Dennoch sollten sämtliche Reagenzien bei der Handhabung und Entsorgung als potenzielle biologische Gefahrstoffe behandelt werden.
- (4) Die Grundsätze der Guten Laborpraxis (GLP) sind zu befolgen.
- (5) Bei Bedarf Laborkittel, geeignete Einweghandschuhe und Schutzbrille tragen, um die Exposition gegenüber potenziell gesundheitsgefährdenden Stoffen zu reduzieren.
- (6) Alle Reagenzien des Kits sowie die Proben sollten vor der Verwendung auf Raumtemperatur gebracht und vorsichtig aber gründlich gemischt werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen von Reagenzien und Proben vermeiden.
- (7) Wenn die Verdünnung oder Rekonstitution mit Wasser erfolgen soll, hierfür deionisiertes, destilliertes oder hochreines Wasser verwenden.

- (8) Die Mikrotiterplatte verfügt über abbrechbare Streifen. Ungenutzte Vertiefungen müssen bei 2 °C bis 8 °C mit Trockenmittelbeutel im verschlossenen Folienbeutel gelagert und im mitgelieferten Rahmen verwendet werden.
- (9) Es ist sehr empfehlenswert, eine Doppelbestimmung der Proben durchzuführen, um mögliche Pipettierfehler erkennen zu können.
- (10) Sobald der Test begonnen wurde, sollten alle Schritte ohne Unterbrechung ausgeführt werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass die erforderlichen Reagenzien, Materialien und Geräte zur vorgesehenen Zeit einsatzbereit sind.
- (11) Die Inkubationszeiten haben Einfluss auf die Ergebnisse. Alle Vertiefungen sollten in der gleichen Reihenfolge und zeitlichen Abfolge behandelt werden.
- (12) Zur Vermeidung einer Kontamination der Reagenzien ist bei jeder Abgabe eines Reagenzes, einer Probe, eines Standards und einer Kontrolle eine neue Einwegpipettenspitze zu verwenden.
- (13) Bei jeder Testanwendung muss eine Kalibrierkurve erstellt werden.
- (14) Bei jeder Testanwendung sollten Kontrollen mitgetestet werden, deren Werte innerhalb der bekannten Vertrauensgrenzen liegen müssen. Die gültigen Vertrauensgrenzen können dem QC-Bericht entnommen werden, der dem Kit beiliegt.
- (15) Komponenten von Kits mit unterschiedlichen Chargenbezeichnungen nicht im selben Test verwenden. Reagenzien nach dem auf dem Kitetikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr benutzen.
- (16) Kontakt mit der Stopplösung vermeiden, da sie 0,25 M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> enthält. Die Lösung kann Hautreizungen und Verbrennungen verursachen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser aus- bzw. abspülen.
- (17) Einige Reagenzien enthalten Natriumazid (NaN<sub>3</sub>) als Konservierungsmittel. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser aus- bzw. abspülen. NaN<sub>3</sub> kann mit Blei- oder Kupferleitungen reagieren und explosive Metallazide bilden. Bei der Entsorgung der Reagenzien mit reichlich Wasser spülen, um die Ansammlung von Azid zu vermeiden.
- (18) Das TMB-Substrat reizt die Haut und Schleimhäute. Bei möglichem Kontakt Augen mit reichlich Wasser und Haut mit Seife und reichlich Wasser aus- bzw. abspülen. Kontaminierte Gegenstände vor der erneuten Verwendung abspülen.
- (19) Für Informationen zu den im Kit enthaltenen gesundheitsgefährdenden Stoffen siehe die Sicherheitsdatenblätter (MSDS). Das Sicherheitsdatenblatt dieses Produkts ist direkt auf der Webseite des Herstellers abrufbar oder auf Anfrage erhältlich.
- (20) Die in dieser Testanleitung angegebenen erwarteten Referenzwerte dienen nur als Hinweis. Es wird empfohlen, dass jedes Labor seine eigenen Referenzwertintervalle erstellt.
- (21) Therapeutische Maßnahmen dürfen sich nicht allein auf die mit diesem Testkit erzielten Ergebnisse stützen, sondern müssen mit anderen diagnostischen Tests und klinischen Beobachtungen abgewogen werden.
- (22) Die Reagenzien des Kits sind als gesundheitsgefährdende Abfälle zu betrachten und gemäß den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

## 2.2 Grenzen des Tests

Jede unsachgemäße Behandlung der Proben oder Modifikationen dieses Tests können die Ergebnisse beeinflussen.

### 2.2.1 Interferenzen

#### Serum/Plasma

Proben, die ein Präzipitat oder die Fibrinfäden enthalten oder die hämolytisch oder lipämisch sind, können zu ungenauen Ergebnissen führen.

#### Sammelurin

Probenvorbereitung beachten! Ist der Säuregehalt des 24h-Sammelurins zu hoch, reicht die Pufferkapazität des Azylierungspuffers nicht aus. In der Folge wird Serotonin nicht mehr quantitativ azyliert.

### 2.2.2 Beeinflussung durch Medikamente

Bitte beziehen Sie sich auf den Punkt „Probenmaterial und Lagerung“.

### 2.2.3 High-Dose-Hook Effekt

Ein Hook-Effekt tritt in diesem Test nicht auf.

## 3. Lagerung und Haltbarkeit

Die ungeöffneten Reagenzien sind bei 2 - 8 °C bis zum Verfallsdatum aufzubewahren. Die Reagenzien dürfen nach Überschreiten des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden. Einmal geöffnet sind die Reagenzien 1 Monat stabil, wenn sie bei 2 - 8 °C gelagert werden. Der einmal geöffnete Folienbeutel sollte stets mit Trockenmittelbeutel sehr sorgfältig wieder verschlossen werden.

## 4. Materialien

### 4.1 Reagenzien im Kit

**BA D-0023**      REAC-TUBES      **Reaction Tubes** - Gebrauchsfertig  
Inhalt:            Reaktionsröhrchen in einem wiederverschließbaren Beutel  
Volumen:        2 x 50 Röhrchen

\*) An Stelle der REAC-TUBES können auch LI 48 - **Macrotiter Plates** (BA D-0033) für die Probenvorbereitung und Azylierung (siehe 6.2) verwendet werden. Diese sind auf Anfrage erhältlich.

**BA E-0030**      WASH-CONC 50x      **Wash Buffer Concentrate** - 50x konzentriert  
Inhalt:            Puffer mit einem nicht-ionischen Detergenz und physiologischem pH  
Volumen:        1 x 20 ml/Fläschchen, Deckel helllila

**BA E-0045**      CONJUGATE      **Enzyme Conjugate** - Gebrauchsfertig  
Inhalt:            Ziege Anti-Kaninchen Immunglobuline konjugiert mit Peroxidase  
Volumen:        1 x 12 ml/ Fläschchen, Deckel rot

**BA E-0055**      SUBSTRATE      **Substrate** - Gebrauchsfertig  
Inhalt:            Chromogenes Substrat mit Tetramethylbenzidin, Substratpuffer und Wasserstoffperoxid  
Volumen:        1 x 12 ml/ Fläschchen, Deckel schwarz

**BA E-0080**      STOP-SOLN      **Stop Solution** - Gebrauchsfertig  
Inhalt:            0,25 M Schwefelsäure  
Volumen:        1 x 12 ml/ Fläschchen, Deckel hellgrau

**BA E-0931**      LI SER 5-HIAA      **Serotonin Microtiter Strips** - Gebrauchsfertig  
Inhalt:            1 x 96 Well (12x8) Antigen beschichtete Mikrotiterstreifen mit Trockenmittelbeutel in einem widerverschließbaren Beutel

**BA E-8910**      SER-AS      **Serotonin Antiserum** - Gebrauchsfertig  
Inhalt:            Kaninchen Anti-Serotonin Antikörper, blau gefärbt  
Volumen:        1 x 12 ml/Fläschchen, Deckel blau

**Standards und Controls** - Gebrauchsfertig

Artikelnr.	Komponente	Deckelfarbe	Konzentration ng/ml	Konzentration nmol/l	Volumen/ Fläschchen
<b>BA R-8901</b>	<u>STANDARD A</u>	weiß	0	0	4 ml
<b>BA R-8902</b>	<u>STANDARD B</u>	hellgelb	15	85,1	4 ml
<b>BA R-8903</b>	<u>STANDARD C</u>	orange	50	284	4 ml
<b>BA R-8904</b>	<u>STANDARD D</u>	dunkelblau	150	851	4 ml
<b>BA R-8905</b>	<u>STANDARD E</u>	hellgrau	500	2840	4 ml
<b>BA R-8906</b>	<u>STANDARD F</u>	schwarz	2500	14175	4 ml
<b>BA R-8951</b>	<u>CONTROL 1</u>	hellgrün	Die zu erwartenden Konzentrationen und Akzeptanzbereiche sind auf dem Flaschenetikett angegeben!		4 ml
<b>BA R-8952</b>	<u>CONTROL 2</u>	dunkelrot			4 ml

Umrechnung: Serotonin (ng/ml) x 5,67 = Serotonin (nmol/l)

Inhalt:            TRIS Puffer mit quecksilberfreiem Konservierungsmittel, aufgestockt mit einer definierten Menge Serotonin

**BA E-8912**      ACYL-REAG      **Acylation Reagent** - Gebrauchsfertig  
Inhalt:            Azylierungsreagenz in Dimethylsulfoxid  
Volumen:        1 x 3 ml/ Fläschchen, Deckel grün


**BA E-8911**      **ACYL-BUFF**      **Acylation Buffer** - Gebrauchsfertig

Inhalt:            TRIS Puffer mit quecksilberfreiem Konservierungsmittel

Volumen:         1 x 55 ml/ Fläschchen, Deckel hellgrau

#### **4.2 Nicht im Kit enthaltene aber zur Durchführung erforderliche Geräte und Reagenzien**

- Kalibrierte Präzisionspipetten zum pipettieren von 25 – 500 µl
- Waschvorrichtung für Mikrotiterplatten (manuell, halbautomatisch oder automatisch)
- Photometer zur Auswertung von Mikrotiterplatten mit 450 nm- und, wenn möglich, 620 - 650 nm Filter
- saugfähige Unterlage
- Vortex-Mischer
- Wasser (deionisiert, destilliert oder ultra-pur)

 Der Assay kann ohne Verwendung eines Mikrotiterplattenschüttlers durchgeführt werden. Wird jedoch ein Schüttler verwendet, sollte dieser folgende Charakteristika haben: Amplitude 3 mm; ca. 600 rpm.

#### **5. Probenmaterial und Lagerung**

Bis zu 2 Tage vor und während der Probennahme (Sammelurin) dürfen keine serotoninhaltigen Nahrungsmittel oder deren Säfte verzehrt werden. Hierzu gehören Ananas, Auberginen, Avocados, Bananen, Johannisbeeren, Kiwis, Melonen, Mirabellen, Pfirsiche, Schokolade, Stachelbeeren, Tomaten, Walnüsse und Zwetschgen. Serotoninwiederaufnahmehemmer beeinflussen den Serotoninspiegel. Personen, die solche Medikamente einnehmen, sollen vor einer Probennahme Rücksprache mit ihrem behandelnden Arzt halten.

**Wiederholtes Einfrieren und Auftauen der Proben sollte generell vermieden werden.**

##### **Serum**

Blut durch Venenpunktion entnehmen (mit Monovette oder Vacuette für Serum), gerinnen lassen und das Serum durch Zentrifugation (nach Angabe des Herstellers) abtrennen. Vor der Zentrifugation muss die Gerinnung vollständig abgeschlossen sein. Bei Patienten, die Antikoagulantien erhalten, kann die Gerinnungszeit länger dauern.

Hämolytische und insbesondere lipämische Proben sollten nicht eingesetzt werden.

Lagerung: bis zu 6 Stunden bei 2 - 8 °C; für längere Zeit (bis zu 6 Monate) bei -20 °C

##### **Urin**

Es kann Spontan- oder 24 Stunden- Sammelurin verwendet werden (im Sammelbehälter werden zur Stabilisierung des Sammelurins 10 - 15 ml 6 M HCl vorgelegt).

Für die quantitative Bestimmung der im Verlauf eines Tages ausgeschiedenen Mengen an Serotonin ist es notwendig, das Volumen des Tagesurins zu bestimmen und für die spätere Auswertung der Ergebnisse zu notieren.

Lagerung: bis zu 24 Stunden bei 2-8°C, für längere Zeit (bis zu 6 Monate) bei -20 °C. Direktes Sonnenlicht sollte vermieden werden.

##### **Plasma**

Mehr als 98 Prozent des zirkulierenden Serotonins ist in Thrombozyten zu finden und wird während der Blutgerinnung ausgeschüttet. Das durch Venenpunktion entnommene Vollblut in einem für EDTA- oder Citrat-Plasma vorgesehenen Blutentnahmeröhrchen (Monovette oder Vacuette) sammeln.

##### **Thrombozytenreiches Plasma (platelet-rich plasma; PRP)**

Um thrombozytenreiches Plasma (PRP) zu erhalten, müssen die Proben für 10 Minuten bei 200 x g zentrifugiert werden. Den Überstand in ein weiteres Röhrchen überführen und die Thrombozyten auszählen.


##### **Thrombozyten**

Ein Thrombozyten – Pellet erhält man, wenn 800 µl physiologische Kochsalzlösung zu 200 µl PRP (enthält zwischen 350.000 – 500.000 Thrombozyten/µl) hinzu gegeben und anschließend zentrifugiert wird (4.500 x g, 10 Minuten bei 4 °C). Der Überstand wird anschließend dekantiert.

200 µl Wasser (deionisiert, destilliert oder ultra-pur) werden zum Pellet hinzugefügt und sorgfältig auf einem Vortex- Mischer gemischt. Die Suspension kann gefroren mehrere Wochen bei < - 20 °C gelagert werden.

Die Proben nach dem Auftauen kurz bei 10000 x g für 2 Minuten bei Raumtemperatur zentrifugieren.

**25 µl** des Überstandes werden für die Probenvorbereitung (Azylierung) benötigt.

 Für die Bestimmung des Serotonins in Thrombozyten-freien Plasma (PFP) und in Liquor muss der Serotonin Research™ ELISA verwendet werden (für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Anbieter).

## 6. Testdurchführung für Serum, Urin und Thrombozyten

Alle Reagenzien und Proben müssen vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden. Es empfiehlt sich, Doppelbestimmungen anzusetzen.

Die Reaktion des Antiserums, Enzymkonjugats und die Aktivität des Enzyms sind temperaturabhängig. Die optimale Temperatur während des Enzymimmunoassay ist zwischen 20 – 25°C. Es wird empfohlen, dies mit einem Thermometer zu überprüfen.



Liegt die gemessene Extinktion außerhalb des Messbereichs, so muss innerhalb von 10 Minuten die Absorption mit einem Mikrotiterplatten-Reader bei 405 nm gemessen werden.

### 6.1 Vorbereitung der Reagenzien

#### Waschpuffer

20 ml **WASH-CONC** **50X** mit Wasser (deionisiert, destilliert oder ultra-pur) auf ein Endvolumen von 1000 ml verdünnen.

Lagerung: 1 Monat bei 2 – 8 ° C

#### Azylierungsreagenz **ACYL-REAG**

Das **ACYL-REAG** (BA E-8912) hat einen Gefrierpunkt von 18.5°C. Um sicher zu stellen, dass es bei Gebrauch flüssig ist, muss es vor Verwendung auf Raumtemperatur gebracht werden und danach eine homogene, kristallfreie Lösung bilden.

### 6.2 Vorbereitung und Azylierung für Serum, Urin und Thrombozyten

1.	Je <b>25 µl</b> der <b>Standards, Kontrollen</b> und <b>Serum-, Urin- und Thrombozyten-Proben</b> in die entsprechenden <b>REAC-TUBES</b> pipettieren.
2.	<b>500 µl</b> <b>ACYL-BUFF</b> in alle <b>REAC-TUBES</b> pipettieren.
3.	<b>25 µl</b> <b>ACYL-REAG</b> in alle <b>REAC-TUBES</b> pipettieren.
4.	Sorgfältig mischen und <b>15 Min</b> bei <b>RT</b> (20 – 25 °C) inkubieren.
	Jeweils <b>25 µl</b> der <b>vorbereiteten Standards, Kontrollen und Proben</b> werden für den nachfolgenden Serotonin ELISA benötigt.

### 6.3 Serotonin ELISA

Die Verwendung eines Schüttlers ist nicht unbedingt erforderlich. Die alternativen Inkubationszeiten ohne Schüttler sind jeweils in kursiver Schreibweise vermerkt und grau hinterlegt.

1.	<b>25 µl</b> der <b>azylierten Standards, Kontrollen</b> und <b>Proben</b> in die entsprechenden Kavitäten der <b>SER 5-HIAA</b> pipettieren.
2.	<b>100 µl</b> <b>SER-AS</b> in alle Kavitäten pipettieren.
3.	Platte <b>30 Min</b> bei <b>RT</b> (20 – 25 °C) auf einem <b>Schüttler</b> (ca. 600 rpm) inkubieren. <i>(oder kurz per Hand schütteln und 1 Stunde bei RT (20 – 25 °C) ohne Schüttler inkubieren).</i>
4.	Den Inhalt der Kavitäten ausleeren oder absaugen. Die Kavitäten <b>3 mal</b> gründlich mit <b>300 µl Waschpuffer</b> waschen, <b>ausleeren</b> und die Restflüssigkeit <b>jedes Mal</b> durch <b>Ausklopfen</b> auf einer saugfähigen Unterlage entfernen.
5.	<b>100 µl</b> <b>CONJUGATE</b> in alle Kavitäten pipettieren.
6.	Für <b>15 Min</b> bei <b>RT</b> (20 – 25 °C) auf einem <b>Schüttler</b> (ca. 600 rpm) inkubieren. <i>(oder kurz per Hand schütteln und 15 Minuten bei RT (20 – 25 °C) ohne Schüttler inkubieren).</i>
7.	Den Inhalt der Kavitäten ausleeren oder absaugen. Die Kavitäten <b>3 mal</b> gründlich mit <b>300 µl Waschpuffer</b> waschen, <b>ausleeren</b> und die Restflüssigkeit <b>jedes Mal</b> durch <b>Ausklopfen</b> auf einer saugfähigen Unterlage entfernen.
8.	<b>100 µl</b> <b>SUBSTRATE</b> in alle Kavitäten pipettieren und für <b>15 ± 2 Min</b> bei <b>RT</b> (20 – 25 °C) auf einem <b>Schüttler</b> (ca. 600 rpm) inkubieren. <i>(oder kurz per Hand schütteln und 15 ± 2 Minuten bei RT (20 – 25 °C) ohne Schüttler inkubieren).</i> <b>Direktes Sonnenlicht vermeiden!</b>
9.	<b>100 µ</b> <b>STOP-SOLN</b> in alle Kavitäten pipettieren und die Mikrotiterplatte kurz schütteln.
10.	<b>Absorption</b> mit einem Mikrotiterplatten-Reader bei <b>450 nm</b> (falls vorhanden, gegen eine Referenzwellenlänge von 620-650 nm) innerhalb von 10 Minuten <b>messen</b> .

**7. Berechnung der Ergebnisse**

<b>Messbereich</b>	<b>Serotonin</b>
	10,2 – 2 500 ng/ml

Eine Standardkurve, mit deren Hilfe die Konzentration der unbekanntenen Proben ermittelt werden kann, wird durch Auftragen der gemessenen Standard-Extinktionen (linearer Maßstab auf der y-Achse) gegen die entsprechenden Standardkonzentrationen (logarithmischer Maßstab auf der x-Achse) erstellt. Für die Auswertung wird eine nicht-lineare Regression (z.B.: spline, 4- parameter, akima) empfohlen.

Die Konzentrationen der **Serum- und Urinproben** können direkt von der Standardkurve abgelesen werden.

**Berechnung des Serotoningehalts in Thrombozyten**

Am nachfolgenden Beispiel soll die Berechnung veranschaulicht werden:  
 Der Serotoningehalt in Blutplättchen wird generell auf  $10^9$  Blutplättchen bezogen. Aus der Standardkurve wird z.B. ein Wert von 100 ng/ml abgelesen. Die Auszählung der Blutplättchen ergibt einen Wert von 300.000 Zellen/ $\mu$ l. Dies würde  $0,3 \times 10^9$  Blutplättchen/ml entsprechen mit einem Serotoningehalt von 100 ng. Damit würde sich ein Serotoningehalt in den Blutplättchen von  $333 \text{ ng}/10^9$  Zellen ergeben ( $100 \text{ ng} \times 1,0 \times 10^9 / 0,3 \times 10^9$ ).

**Umrechnung**

Serotonin (ng/ml) x 5,67 = Serotonin (nmol/l)

**Erwartete Referenzwerte**

Es wird empfohlen, dass jedes Labor seine eigenen Referenzwerte ermittelt.


In einer Studie wurden Proben von gesunden Erwachsenen untersucht. Dabei ergaben sich mit dem Serotonin ELISA <sup>Fast Track</sup> folgende Werte:


	<b>Serotonin</b>
Serum	70 – 270 ng/ml
Urin	50 - 250 $\mu$ g/24h
Serotonin in Thrombozyten	500 - 950 ng/ $10^9$ Blutplättchen

**7.1 Qualitätskontrolle**

Es wird empfohlen, mit jeder Testserie entweder die Kitkontrolle oder andere kommerzielle Kontrollproben mitzubestimmen, um die Leistungsfähigkeit des Tests zu überprüfen. Diese Kontrollen müssen dabei wie die unbekanntenen Proben behandelt werden. Die Kontrollproben müssen dabei innerhalb der Nachweisgrenze liegen. Die Vertrauensbereiche der Kontrollen sind im QC-Report aufgeführt.

**7.2 Typische Standardkurve**

 *Beispiel aus 11 Ansätzen; bitte nicht für die Auswertung verwenden!*

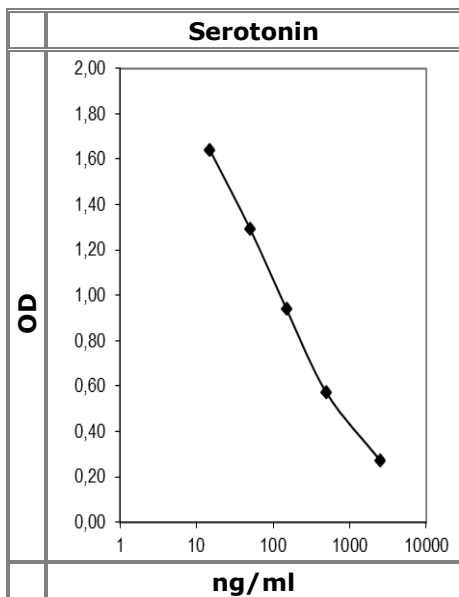

## 8. Testcharakteristika

<b>Analytische Sensitivität</b>	Limit of Detection (LOD) Limit of Quantitation (LOQ)	6.2 ng/ml 10.2 ng/ml
---------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------

<b>Analytische Spezifität (Kreuzreaktivität)</b>	<b>Substanz</b>	<b>Kreuzreaktivität (%)</b>
	Tryptamin	0,05
	Melatonin	0,08
	5-Hydroxyindol-Essigsäure	< 0,014
	Phenylalanin	< 0,014
	Histidin	< 0,019
	Tyramin	< 0,018
	5-Hydroxytryptophan	< 0,014

<b>Präzision</b>							
<b>Intra-Assay</b>				<b>Inter-Assay</b>			
	Probe	Bereich (ng/ml) Mittelwert ± SD	CV (%)		Probe	Bereich (ng/ml) Mittelwert ± SD	CV (%)
Serotonin Urin (n = 40)	1	140,7 ± 16,3	11,6	Serotonin Urin (n = 15)	1	126,1 ± 14,2	11,3
	2	421,2 ± 38,6	9,2		2	414,5 ± 48,6	11,7
	3	1560 ± 215,3	13,8		3	1343 ± 200,2	14,9
Serotonin Serum (n = 20)	1	101,3 ± 9,6	9,7	Serotonin Serum (n = 7)	1	83,1 ± 10,3	12,4
	2	246,8 ± 31,2	12,6		2	244,3 ± 25,4	10,4
	3	667,5 ± 71,6	10,8				

<b>Linearität</b>			Bereich (ng/ml)	Serielle Verdünnung bis	Mittelwert (%)	Bereich (%)
	Serotonin	Urin	30 - 3500	1:65	100	88 - 118
		Serum	40 - 3000	1:33	96	80 - 113

<b>Wiederfindung</b>			Mittelwert (%)	Bereich (%)	% Wiederfindung nach Aufstockung
	Serotonin	Urin	96	74 - 105	
		Serum	108	89 - 126	

<b>Methodenvergleich mit RIA*</b>	Urin	$y = 0,94x + 19.58; R^2 = 0,98$
	Serum	$y = 0,85x + 33.18; R^2 = 0,97$







\*Kommerziell erhältlicher RIA

## 9. Referenzen/Literatur

- (1) Oliveira et al. Disturbances of Wnt/ $\beta$ -catenin pathway and energy metabolism in early CKD: effect of phosphate binders. *Nephrol Dial Transplant*, 28(10):2510-2517 (2013)
- (2) Shahin et al. Detection of Plasma and Urinary Monoamines and Their Metabolites in Nonsegmental Vitiligo. *Acta Dermatovenerol Croat*, 20(1):14-20 (2012)
- (3) Ciprandi et al. Serotonin in Allergic Rhinitis: a Possible Role for Behavioural Symptoms, 10(3):183-188 (2011)

 **Aktuelle Literatur oder weitere Informationen zum Test werden Ihnen auf Anforderung von Ihrem Anbieter gerne zur Verfügung gestellt.**

**Symbole:**

	Lagertemperatur		Hersteller		Enthält Testmaterial für <n> Teste
	Verwendbar bis	<b>LOT</b>	Chargennummer	<b>IVD</b>	In vitro Diagnostikum
	Vor Gebrauch Packungsbeilage lesen	<b>CONT</b>	Inhalt	<b>CE</b>	CE gekennzeichnet
	Achtung	<b>REF</b>	Katalog-Nummer	<b>RUO</b>	Nur für Forschungszwecke